



LETZTEST
water testing for remote locations.


www.letztest.com

جعل اختبار جودة المياه تجربة سهلة

ورقة البيانات التقنية

صندوق مختبر المياه المتنقل

حل يغير قواعد اللعبة ويحول مراقبة جودة المياه في المواقع النائية إلى نجاح يمكن تحقيقه بسهولة. قابل للتخصيص حسب احتياجاتك الفردية.

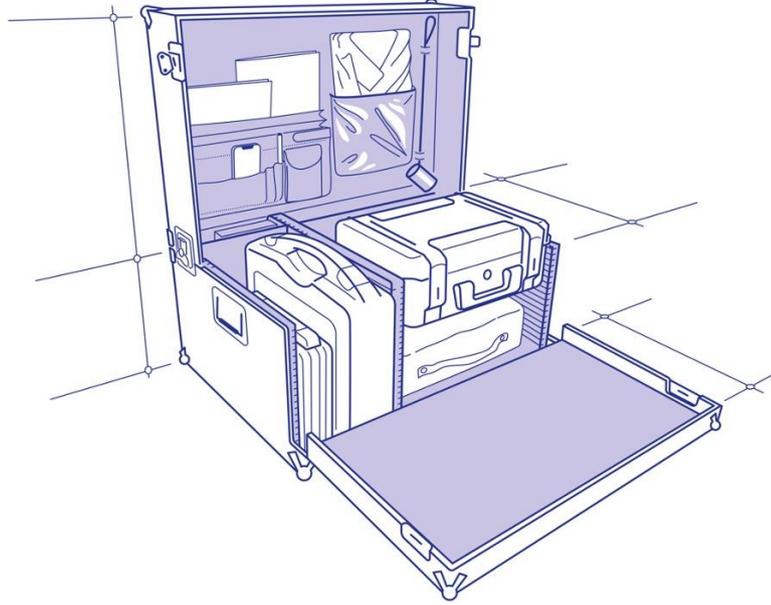

- 1 -

آخر EST
جوتفريد هاجن ستريت. 60-62
51105 كولونيا
ألمانيا

هاتف +49 221 56 09 09 04
موبايل / واتساب: +49 157 89627536
البريد الإلكتروني: info@letz-test.com
الويب: www.letztest.com

المالك: أدريان ليتزدر
معرف ضريبة القيمة المضافة: DE328745680
EOR: DE357063060317917

وصف

حل رائد لمشاريع مختبرات المياه عن بعد. تم تخصيص مختبر المياه المتنقل المجهز بالكامل وسهل الاستخدام لتلبية احتياجاتك الخاصة. إنه يعزز فعالية التكلفة والاستقلالية والراحة والتنقل والموثوقية لأنشطة مراقبة المياه في المواقع النائية. تمكن الفنيين عن بعد من لعب دور ميسر في المراقبة الناجحة لجودة المياه.



شكل 1 - صناديق مختبر المياه المتنقلة LETZTEST هي حل رائد لمشاريع مختبرات المياه عن بعد. يمكن تركيبه على المركبات للتطبيقات أثناء التنقل.

دلائل الميزات:

- مجهزة بأحدث معدات LETZTEST لأخذ عينات المياه واختبار جودة المياه.
- ميزات الحماية مثل العزل المائي والقفل الآمن لسلامة المعدات.
- دمج الوظائف المتعددة ، وتقديم أسطح العمل ، ومناطق الكتابة ، وحامل الجهاز الرقمي ، والعديد من الميزات العملية الأخرى.
- يمكن تركيبه على المركبات للتطبيقات أثناء التنقل.
- مزود بأدوات إدارة الجودة والبيانات لسير العمل والموثوقية ببساطة.

- 2 -

- خيار لعرض شعار مؤسستك على السطح الخارجي.

لا يضمن هذا الحل الشامل أعلى المعايير في مراقبة جودة المياه فحسب ، بل يوفر أيضا الراحة والتنوع للمهنيين العاملين في المواقع النائية.

المواصفات

- المادة. رقم: 1190
- شكل: صندوق صلب حسب الطلب
- البعد: مخصصة للطلب الخاص بك
- الوزن: بين 5 – 45 كجم حسب الطلب.
- ضد للماء: نعم
- نوع العينة: ماء
- خيارات التثبيت على / على المركبات: نعم
- يمكن استخدامها:
 - في مبانى مختبر المشروع المركزي.
 - في التطبيقات أثناء التنقل ، الهاتف المحمول.

محتوى الصندوق

- يتكون الصندوق من ثلاثة مكونات منفصلة يمكن فصلها ونقلها واستخدامها بشكل فردي إذا لزم الأمر.
- 1. أخذ عينات المياه ونقل العينات وحالة التخزين:
 - LETZTEST الفولاذ المقاوم للصدأ عينات المياه. 1 جهاز كمبيوتر
 - زجاجات أخذ العينات القابلة لإعادة الاستخدام للتحليل الميكروبيولوجي (250 مل) ؛ 10 قطع
 - زجاجات أخذ العينات القابلة لإعادة الاستخدام للتحليل الفيزيائي الكيميائي (250 مل) ؛ 10 قطع
 - صندوق تبريد لنقل عينات المياه ؛ 1 جهاز كمبيوتر
 - سجل المعدات 1 جهاز كمبيوتر
 - دفتر ملاحظات قوي لحفظ السجلات (1 قطعة) ؛ 1 جهاز كمبيوتر
 - أوراق أخذ العينات في مطروف قوي مع رمز الاستجابة السريعة لإعادة الطباعة الذاتية ؛ 1 جهاز كمبيوتر
 - أوراق الفحص الصحي في مطروف قوي مع رمز الاستجابة السريعة لإعادة الطباعة الذاتية ؛ 1 جهاز كمبيوتر
 - معطف المختبر 1 جهاز كمبيوتر
 - نظارات واقية المختبر. 1 جهاز كمبيوتر
 - ميزان حرارة رقمي مع مسجل بيانات ؛ 1 جهاز كمبيوتر
 - سطح الكتابة 1 جهاز كمبيوتر
 - حامل لسهولة عرض وتشغيل الهاتف المحمول أو الجهاز اللوحي لإدخال البيانات وتخزينها ؛ 1 جهاز كمبيوتر
 - قلم حبر جاف 1 جهاز كمبيوتر
 - قلم مختبر مقاوم للماء 1 جهاز كمبيوتر
 - مساحة إضافية لموقف بنس المحمول ، ومعدات اختبار المعلمات التي يجب اختبارها على الفور (مثل درجة الحرارة ، ودرجة الحموضة ، والتوصيل ، والتعكر ، والكلور الحر) ، ومعقم اليدين أو ما شابه ذلك ؛ 1 جهاز كمبيوتر

2. مختبر المياه الميكروبيولوجية:

- طقم ترشيح الغشاء المحمول LETZTEST ؛ 1 جهاز كمبيوتر
- حاضنة LETZTEST المحمولة الخالية من الكهرباء - 37 درجة مئوية ؛ 1 جهاز كمبيوتر
- أو
- طقم اختبار المياه المنزلية LETZTEST ؛ الكمية حسب الطلب
- أنبوب اختبار LETZTEST ؛ الكمية حسب الطلب

3. مختبر المياه الفيزيائية والكيميائية:

- أنبوب التعكر 1 جهاز كمبيوتر. و/أو
- LETZTESTER - مجموعة مقارنة الألوان المرئية النهائية - بالإضافة إلى الكواشف ؛ 1 جهاز كمبيوتر و / أو
- LETZTEST متعدد الأس الهيدروجيني | إي سي | شال | TDS | درجة الحرارة | ORP ؛ 1 جهاز كمبيوتر. و / أو
- مقياس ضوئي LETZTEST - بالإضافة إلى الكواشف ؛ 1 جهاز كمبيوتر. و / أو
- مجموعة اختبار الزرنخ البصري 300 اختبار ؛ 1 جهاز كمبيوتر

أدوات دعم إضافية

- رموز QR في المربع المؤدي إلى مقاطع فيديو تدريب LETZTEST
- رمز الاستجابة السريعة في المربع المؤدي إلى الدعم الفني المباشر للمستخدمين النهائيين عبر WhatsApp بواسطة LETZTEST
- كتيبات تعليمات سهلة الفهم ومصورة

المشاركون في تطوير المنتج


إن التصميم المفاهيمي المحسن لصندوق مختبر المياه المتنقل LETZTEST هو نتيجة للتعاون مع: Aqua Solutions Intl. Ltd (i). بما في ذلك موظفي المؤسسة الوطنية للمياه والصرف الصحي في أوغندا ، (ii) بلدية eThekweni في ديربان ، جنوب إفريقيا ، (iii) مكتب Malteser International أروا ، أوغندا ، (iv) مختبر مياه مقاطعة مادي أوكولو في مادي أوكولو ، أوغندا. معا ، نسعى لتحقيق هدف جعل مراقبة جودة المياه تجربة سهلة لأصحاب المصلحة في مياه الشرب في الأماكن النائية حول العالم.

المواد الاستهلاكية

إعادة ترتيب المواد الاستهلاكية عبر info@letz-test.com. يرجى ملاحظة أن لديك المرونة في اختيار المواد الاستهلاكية. تم تصميم معداتنا لاستيعاب أنواع متعددة من المواد الاستهلاكية من العديد من الموردين المختلفين. ومع ذلك ، نقدم LETZTEST أفضل جودة ممكنة وتواريخ انتهاء الصلاحية وأسعار المواد الاستهلاكية لاختبار المياه ، ويمكننا ضمان التسليم السريع والفعال من حيث التكلفة.

إنتاج

100٪ صنع في ألمانيا. نشأت شركة [Letzner Pharmawasseraufbereitung GmbH](#) (الآن EnviroFALK) وهي شركة تولي أهمية كبيرة لجودة معادتها. يتم فحص خطوات الإنتاج الوسيطة والمنتجات النهائية مقابل معايير الإصدار المحددة. (PharmaWaterSystems)

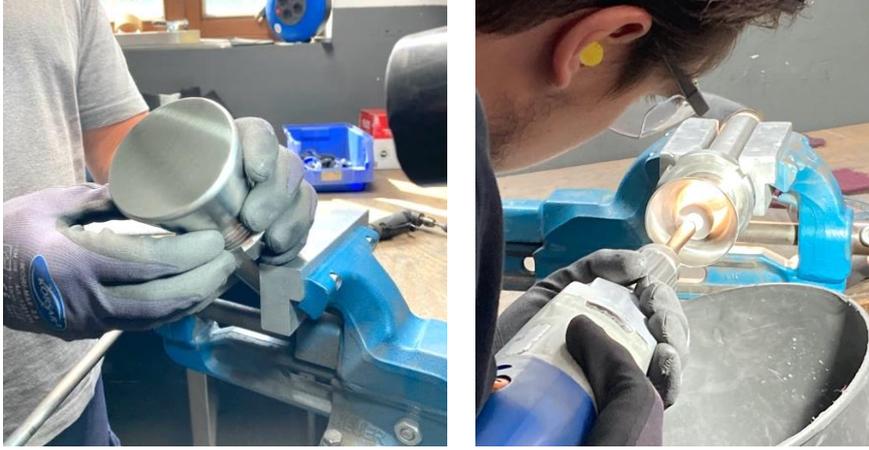

HIGH QUALITY

MADE IN GERMANY

الشكل 2 - LETZTEST هو البساطة بأعلى جودة.

دعم إضافي للمستخدمين النهائيين

تحتوي كل مجموعة على رمز الاستجابة السريعة الذي يؤدي إلى [مقاطع فيديو للتدريب العملي](#). في حالة وجود المزيد من الأسئلة ، يمكن للمستخدم النهائي أيضا الاتصال مباشرة وبسهولة بفني LETZTEST عبر نفس رمز الاستجابة السريعة.



الشكل 3 - بقودك رمز الاستجابة السريعة في كل مجموعة إلى فيديو تدريبي